



MICRONEEDLING PEN



ENGELS LABICAL

Beschreibung:

Strahlende Haut, neu definiert!

Der Microneedling Pen bringt deine Hautpflege auf das nächste Level. Feine, präzise Nadeln regen die natürliche Regeneration an, fördern die Kollagenproduktion und sorgen für ein sichtbar glatteres, ebenmäßigeres Hautbild.

Für weniger Falten, verfeinerte Poren und einen frischen Glow – ganz bequem bei dir zu Hause. Deine Haut wird es lieben

WIE VERWENDET MAN DEN MICRONEEDLING PEN?



1. Reinigen und trocknen Sie die Haut.



2. Installieren Sie die Patrone. (Die Patrone ist Einweg und kann nicht wiederverwendet werden, um Infektionen zu vermeiden.)



3. Passen Sie die Tiefe der Nadel durch Drehen des Einstellrings an, vorzugsweise von klein nach groß.



4. Wählen Sie die geeignete Geschwindigkeitsstufe und EMS-Stufe aus.
Geschwindigkeitsstufe: Je höher die Stufe, desto schneller die Geschwindigkeit.
EMS-Stufe: Je mehr Licht, desto stärker die Stufe.



5. Verwenden Sie den Microneedling Pen mit der Punktdruckmethode. Halten Sie den Pen in einem rechtwinkligen Winkel zur Haut, heben Sie das Gesicht sanft nach oben, wobei die Pen-Spitze nach unten zeigt, so gut wie möglich.



6. Massage einmassieren.

HINWEIS: Verwenden Sie den Microneedling Pen nicht auf offenen Wunden oder gereizter Haut.

VERBESSERN SIE IHRE SCHÖNHEITSROUTINE

Effektive Hautpflege für deine strahlende Schönheit.



Falten



Akne-Male



Akne-Narben



Große Poren



Feine Linien



Pigmentierung



Hauterschlaffung



Microneedling Pen M8



6 Geschwindigkeiten



3L Stecker



Zuverlässig und Effizient

Technische Spezifikation:

Funktion: Mit Kabel oder Kabellos

Geschwindigkeit: 6 Stufen

Akkuspezifikation: 380 mAh

Einstellbare Nadellänge: 0 – 2,5 mm

Nadel Box: 11 / 16 / 24 / 36 / 42 Nadeln


Nano S / Nano 3D / Nano 5D / Nano R




Microneedling Pen M8S



6 Geschwindigkeiten

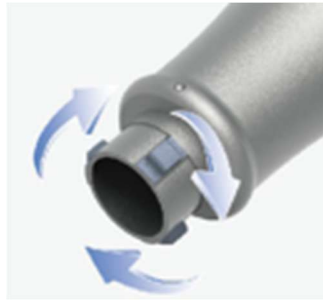

3L Stecker

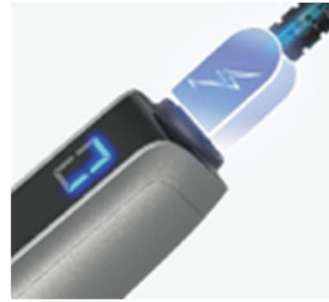

Typ C Ladeanschluss

Technische Spezifikation:

Funktion: Kabellos

Geschwindigkeit: 6 Stufen

Akkuspezifikation: 380 mAh

Einstellbare Nadellänge: 0 – 2,5 mm

Nadel Box: 12 / 18 / 24 / 36 / 42 Nadeln

Nano S / Nano R



Microneedling Pen H5



Kontinuierliche Abgabe von zirkulärem multipolarem Strom, der tief in die Haut eindringt und die doppelte Wirkung von EMS + Essenz entfaltet.



1 Hand Bedienung



Induktive Ladestation

Technische Spezifikation:

Funktion: Kabellos
Geschwindigkeit: 6 Stufen
Akkuspezifikation: 700 mAh
Einstellbare Nadellänge: 0 – 1,0 mm
EMS-Intensität: 4 Stufen
EMS Frequenz: 0,25 Hz
Flüssigkeitstank: 3 ml
Flüssigkeit Ausstoß: 3 Stufen
Nadel Box: 12 / 36 / 42 Nadeln
Nano HS / Nano HR





MICRONEEDLING PEN
MODEL M8, M8S UND H5

Herausgeber:

Engels-Labical
Feudenheimer Str. 45
68549 Ilvesheim
Germany

© 2026 Engels Labical
Alle Rechte vorbehalten

info@engels-labical.de
www.engels-labical.de